

高速度カメラ Fastec HiSpec5

Fastec HiSpec5 カメラは、HiSpec4 と同じ性能を持ち、**内蔵メモリーを最大 16GB** まで搭載可能なカメラです。HiSpec4 と同様に、最大解像度が **1,696x1,700 ピクセル** で 500fps の撮影が可能です。5,000fps の高速度撮影でも、512x512 ピクセルの解像度で撮影することができます。

また、69mmx93mmx93mm/900g と小型であり、内蔵充電電池による 1 時間の駆動も可能です。ノートパソコンによるカメラコントロールができ、ギガバイトイーサネット接続により撮影データの保存も瞬時に行うことができます。


高速度カメラ HiSpec5 の3つの特長

特長1 自由な撮影環境

- カメラ本体の大きさが69x93x93mmと小型で重さ900g
- 機械内部にも容易にレイアウトが可能なカメラサイズ
- フルハイビジョンサイズ以上の **1696x1700 ピクセル** を実現
- **1,000fps** で **1,280x1,024 ピクセル** が可能
- **5,000fps** で **512x512 ピクセル** が可能
- **全方向100G** までの耐 G 性能(オプション)
- **最大16GB** のメモリー搭載 → 長時間録画が可能
- 内蔵充電電池により、1 時間の駆動が可能、または内部データを 24 時間保持することが可能




小型・軽量

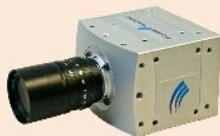

サイズ **69x93x93mm**、重量 **900g**
マジックアームを使用した自由レイアウトが可能

最大解像度 1,696x1,700 ピクセル

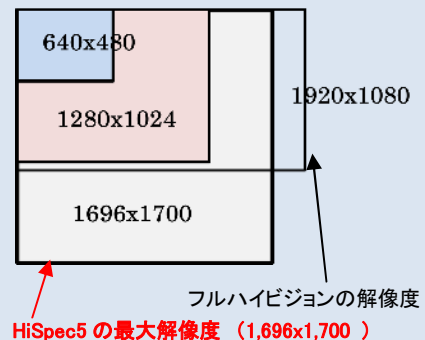

特長2 標準的なイーサネット環境による自由なシステム構築


- 100/1000Base のイーサネット環境をサポートし、安価なシステム構築と安定性を実現
- スイッチングハブによるマルチカメラコントロールが可能(最大4台)
- 最大4台の同期撮影が可能
- 外部トリガー入力が可能(5V TTL またはコンタクトクローザー)



特長3 撮影を容易にする特別な機能

- 自由な撮影速度と撮影解像度 ⇒ 撮影速度と撮影範囲を自由に設定が可能
- オートダウンロード機能による自動化 ⇒ 撮影・データ保存を自動で行い無人運転が可能
- モーショントリガー機能（オプション）⇒ カメラ画像の特定エリアの諧調変化をカメラが自動で認識し、カメラ自体でトリガーを発生
- メモリーパーティション機能（オプション）⇒ カメラの内部メモリーを最大16分割しての連続撮影が可能
- 特殊撮影モード(バーストモード) (1)トリガー入力の間だけ指定速度の撮影を行うことが可能
(2)トリガー入力の度に指定フレーム数を指定速度で撮影することが可能


撮影条件設定画面

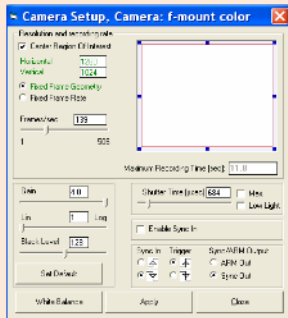

撮影速度の自由な設定が可能
 解像度の自由な設定が可能
 シャッター速度の自由な設定が可能
 センサーゲインで高感度設定が可能
 同期設定撮影設定が可能

モーショントリガー機能(オプション)

モーショントリガー感度設定

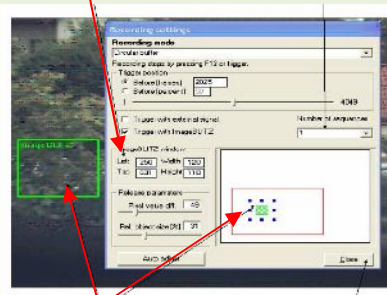


モーショントリガー有効範囲設定

カメラ画像の特定エリアの諧調変化をカメラが自動で認識し、カメラ自体でトリガーを発生


オートダウンロード機能

指定したファイルに撮影データを自動的に保存、その後自動的に復帰して撮影を継続する機能。自動撮影に最適な機能

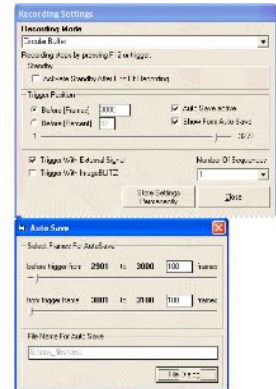


マルチシーケンス機能(オプション)

メモリーを最大 16 等分し、連続的に撮影を行える機能
 カメラ内部メモリーを有効に使用する機能

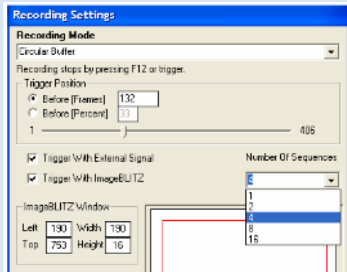

バーストモード機能

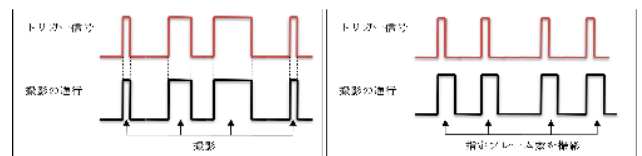

- (1)トリガー信号が ON のときにのみ指定した撮影速度及び解像度で撮影が行い、次のトリガーまで撮影が停止、その後トリガー入力があると再度撮影を開始
- (2)トリガー信号が入力されるたびに指定した撮影速度・解像度及び指定したフレーム数を撮影、次のトリガー入力まで撮影が休止し、トリガー入力で再度撮影が開始

HiSpec5 C マウント モデル

HiSpec5	モノクロ	4GB	メモリー	C マウント	4,700,000円
HiSpec5	カラー	4GB	メモリー	C マウント	4,700,000円
HiSpec5	モノクロ	8GB	メモリー	C マウント	5,350,000円
HiSpec5	カラー	8GB	メモリー	C マウント	5,350,000円
HiSpec5	モノクロ	16GB	メモリー	C マウント	5,900,000円
HiSpec5	カラー	16GB	メモリー	C マウント	5,900,000円

(※ノートPC・レンズ・ライト・三脚等は、含まれていません。)

・仕様は予告無く変更されることがあります。禁無断転載 (2014.02)



株式会社日本ファステックイメージング

東京都葛飾区白鳥 3-27-15 〒125-0063
 TEL 03-5650-5320 FAX 03-5650-5326
<http://www.fastecimaging.co.jp>

販売代理店